

Mão

mediroyal 
mediroyal.se

 JM
produtos hospitalares





Tala com Mola Helicoidal para Extensão do Dedo

Esta tala permite um grau superior de extensão da articulação interfalângica proximal do dedo (IFP). As molas helicoidais estão colocadas nas duas laterais da articulação enquanto as almofadas, uma distal e outra proximal, contribuem para a distribuição homogênea da pressão. A faixa anterior é ajustável com velcro. A força aplicada sobre a articulação é de aproximadamente 12,4 N em plena extensão. **INDICAÇÕES** Contraturas de flexão da articulação IFP.

502 Tala com Mola Helicoidal para Extensão do Dedo

Tamanho	A	B	C	D
Comprimento	64	70	76	83

Comprimento em mm, medido com o dedo em extensão, desde a prega palmar distal até à articulação IFD.



Tala ACU para Extensão do Dedo

Esta tala tem bastante força de extensão e é ideal para recuperar os últimos graus de extensão da IFP. A mola pode ser ajustada apertando com cuidado as almofadas nas extremidades. A almofada dorsal assegura uma distribuição uniforme da pressão pelo dedo. A força aplicada sobre a articulação é cerca de 3,4 N em 15° de flexão. **INDICAÇÕES** Contraturas de flexão com limitações no âmbito do movimento e rigidez crescente das articulações.

507 Tala ACU para Extensão do Dedo

Tamanho	AA	A	B	C	D
Comprimento	57	67	76	86	95
Largura	22	22	25	29	29

Comprimento em mm, medido com o dedo em extensão, desde a prega palmar distal até à articulação IFD.



Tala para Extensão do Dedo

Esta tala faz a extensão da articulação interfalângica proximal (IFP) e tem um ligeiro efeito de extensão também ao nível da articulação metacarpo-falângica (MCF). A articulação interfalângica distal (IFD) fica totalmente liberta. A pressão é distribuída pela almofada dorsal, podendo ser aumentada ou reduzida por meio do ajuste da mola. A força é de 2,3 N em 15° de flexão. **INDICAÇÕES** Deficiências de 45° ou menos na extensão da articulação IFP, deformação de Boutonnière.

501 Tala para Extensão do Dedo

Tamanho	AA	A	B	C	D
Comprimento	57	67	76	89	102
Largura	22	22	25	29	29

Comprimento em mm, medido com o dedo em extensão, desde a prega palmar distal até à articulação IFD.




Tala para Extensão da Articulação IFP

A tala 504 é uma versão mais curta da tala 501, evitando o envolvimento da articulação MCF. Os tamanhos mais pequenos podem ser usados na articulação IFD. A mola é facilmente ajustável, tendo uma força de 2,3 N em 15° de flexão. **INDICAÇÕES** Deficiências de 45° ou menos na extensão da articulação IFP, deformação de Boutonnière.

504 Tala para Extensão da Articulação IFP

Tamanho	AA	A	B	C	D
Comprimento	44	48	51	57	67
Largura	22	22	25	29	29

Comprimento em mm, medido com o dedo em extensão, desde a prega palmar distal até à articulação IFD.

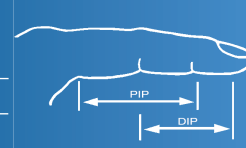


Tala para Extensão Ligeira do Dedo

A tala 602 permite uma extensão ligeira mas eficaz das articulações interfalângicas, podendo ser usada em contraturas de flexão quer da IFP quer da IFD. É ideal para tratamentos prolongados devido à sua baixa força, cerca de 1,1 N em 15° de flexão. **INDICAÇÕES** Lesões por esmagamento ou queimadura, deformação de Boutonnière ou contraturas da articulação IFP.

602 Tala para Extensão Ligeira do Dedo

Tamanho	AA	A	B	C	D
Comprimento	44	48	51	57	67
Largura	22	22	25	29	29

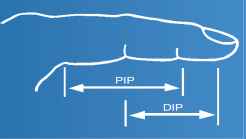

Comprimento em mm, medido no lado volar do dedo, a partir da base da articulação.




Tala com Mola Helicoidal para Flexão do Dedo

Esta tala de mola permite auxiliar a flexão da articulação IFP. A almofada dorsal proporciona uma excelente aplicação, com distribuição uniforme da pressão. A tensão que a tala exerce consegue fletir uma articulação descontraída até 80°, com uma força de cerca de 2,3 N. **INDICAÇÕES** contracturas de extensão da articulação IFP.

503 Tala com Mola Helicoidal para Flexão do Dedo

Tamanho	A	B	C	D
Comprimento	64	70	76	83



Comprimento em mm, medido no lado volar do dedo, a partir da base da articulação.




Tala para Flexão do Dedo

Esta tala permite a flexão eficaz da articulação IFP ou IFD, sendo ideal para tratamentos prolongados devido à sua baixa força, cerca de 1,1 N. **INDICAÇÕES** Recuperação da flexão da articulação IFP após contratura. Redução da deformidade do dedo em gatilho e dos efeitos de lesões por esmagamento ou queimadura.

601 Tala para Flexão do Dedo

Tamanho	AA	A	B	C	D
Comprimento	32	38	44	57	70

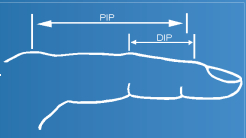

Comprimento em mm, medido no lado volar do dedo, a partir da base da articulação.



jmv.com.pt
mediroyal.se



- 00 HOME
- 01 EMPRESA
- 02 CATALOGO
- 03 NOTICIAS
- 04 LINKS
- 05 CONTACTO

PESQUISA

MAILING LIST

nome

email



Benvindos ao site da JMV Produtos Hospitalares!

Este site tem como objectivo dar a conhecer os produtos que comercializamos. A JMV Produtos Hospitalares Lda. fornece, desde 1987, hospitais publicos e privados, clinicas, centros de saúde, lares privados e estatais, farmácias e ortopedias, trabalhando com a maioria dos profissionais de saúde.

Para mais informações contacte-nos directamente.


Agradecemos a sua visita.

Teleflex MEDICAL

Descubramos para o futuro o operador e instrumental cirurgico.

Férias ...
Aproximando-se o período de férias, a JMV vem desde já desejar ...

JMV conquista estatuto de PME Líder ...
É com muito orgulho que informamos os nossos clientes e form ...

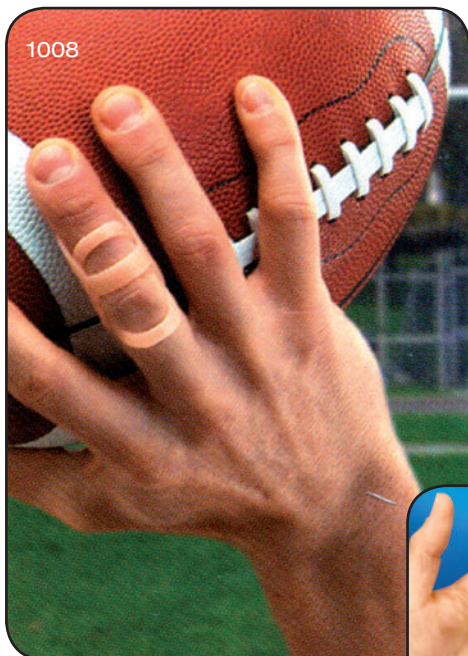


Oval 8 / Tala para Dedos

A Tala Oval 8 estabiliza, alivia e corrige as articulações interfalângicas. Contribui para melhorar o funcionamento da mão sem ser muito volumosa. Fabricada em polipropileno com 1,6mm de espessura, é confortável e fácil de limpar. Pode ser ajustada individualmente com um secador de mão. Os tamanhos disponíveis são idênticos aos das alianças de casamento: 2 -15. Vendem-se individualmente ou numa caixa de conjunto com 44 peças. **INDICAÇÕES** Dedo em colo de cisne, botoeira, dedo em martelo, redução de desvio lateral ou descarga do dedo em gatilho.

1008 Oval 8 / Tala para Dedos

Tamanhos 2 -15.

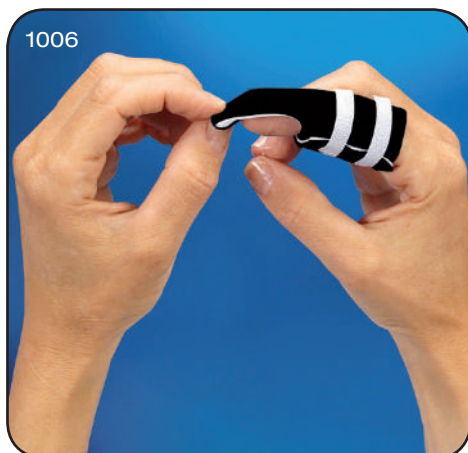

Faixa para Extensão/Flexão do Dedo

Esta faixa pode ser usada como tala de extensão ou flexão de forma muito confortável, quer de dia quer durante a noite. Prenda a faixa no dedo e depois passe um fio de borracha ou de nylon através do anel e prenda na tala. Trata-se dum material sem látex, com uma boa fricção e permeável ao ar, de ótimo contacto com a pele. **INDICAÇÕES** Pós-operatório em defeitos de extensão.

1006 Faixa para Extensão/Flexão do Dedo

Embalagem	5 ou 25 unidades / embalagem
Cor	Preta
Tamanho	Universal



Faixas de Junção 13 mm

Esta faixa de ligação confortável e segura é feita num material de espuma sem látex, de baixo perfil e boa aderência. É ideal para atividades desportivas e quotidianas. **INDICAÇÕES** Distorções ligeiras, inchaço, dor ou lesões dos ligamentos. Também pode ser usada em fraturas estáveis. Largura 13 mm.

1005 Faixas de Junção 13 mm

Largura (mm)	13
Embalagem	5/25/50/100
Cor	Preta
Tamanho	Universal


Finger Hugger – Estabilizador de Dedo RIC (Recuperação, Imobilização, Compressão)

É simultaneamente uma tala estática e dinâmica com compressão, num conceito único que permite a utilização para estabilização estática em conjunto com a compressão e mobilidade necessárias. A bolsa de reforço no lado volar permite a aplicação de uma tala rígida de alumínio ou uma mola flexível de aço. A compressão pode ser ajustada caso a caso por meio do fecho com atacadores. **INDICAÇÕES** Fraturas dos dedos da mão, lesões dos ligamentos, dedo em gatilho, dedo botoeira.

670 Finger Hugger – Estabilizador de Dedo RIC

Tamanho	AA	A	B	C	D
Comprimento	32	51	64	76	89

Comprimento em mm, medido conforme ilustrado na figura à direita.

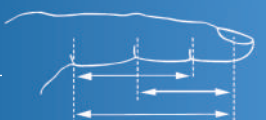

STAX

A tala Stax é feita de policarbonato transparente, destina-se à proteção da falange distal e extensão da articulação IFD. O material perfurado da tala reduz a possibilidade de maceração da pele e a abertura em janela permite a observação da ponta do dedo e do leito da unha. **INDICAÇÕES** Lesões do dedo e da unha, dedo em martelo.

620-627 Stax

635 Kit de Talas Stax

Tamanhos	Quantidade
620 - 0	2
621 - 1	3
622 - 2	5
623 - 3	5
6235 - 3,5	5
624 - 4	5
625 - 5	5
6255 - 5,5	5
626 - 6	3
627 - 7	2
640 Velcros	25



Tala para Desvio Cubital

Esta tala é formada por um núcleo de alumínio forrado de plastizote, o que a torna muito leve, ajustável, macia e confortável para o paciente. Serve para apoio e correção das articulações MCF, bem como para endireitar os dedos. Pode ser usada para apoio do arco palmar em doentes reumáticos e limite temporário do âmbito de movimento. A largura da mão deve ser medida (em mm) por cima da articulação MCF. Há uma versão esquerda e outra direita. **INDICAÇÕES** Artrite reumatoide, desvio cubital, pós-operatório na cirurgia metacarpo-falângica.

202 Tala para Desvio Cubital

Tamanho	B-Pequeno	C-Médio	D-Grande
Largura	57-70	73-83	86-95

Largura da mão medida em mm por cima da articulação MCF. Modelos esquerdo e direito.





Tala Estabilizadora Thenax Duo

Fabricada em TriTex (sem látex), esta tala foi desenvolvida para estabilizar as articulações carpometacarpiana e metacarpianas, bem como a eminência tenar. A faixa dorsal, com a peça fina de plástico integrada, proporciona um apoio eficaz para a eminência tenar em abdução palmar. O fecho é de velcro macho/fêmea com fitas de Lycra, de fácil aplicação. **INDICAÇÕES** Dor, fraqueza, artrose, osteoartrite, problemas reumáticos e tendinites. Limpeza: Lavar à mão

MR2184 Tala Estabilizadora Thenax Duo

Tamanho	Circunferência do punho	Modelos Esquerdo e Direito	
Pequeno	14-16 cm	Cor	Preta
Médio	16-18 cm	Material	TriTex
Grande	18-20 cm	Modelos Esquerdo e direito	



Tala Thenax FormAT Mid

Este modelo inovador consiste numa tala mista de material têxtil (neoTex) e termoplástico. A peça de termoplástico é moldada com água quente diretamente no paciente ou já colocada na bolsa interior. Possui também uma peça ajustável para o polegar. Este sistema é muito confortável e permite um apoio personalizado. **INDICAÇÕES** Instabilidade ligeira a moderada e/ou dor das articulações CMC ou MCF, lesões de ligamentos, Morbus de Quervain, tendinites, doenças degenerativas ou pós-traumáticas.

EU2051 Tala Thenax FormAT Mid

Tamanho	Circunferência do punho	Tamanho	Circunferência do punho
X-Pequeno	13-14 cm	Grande	18-20 cm
Pequeno	14-16 cm	X-Grande	20-22 cm
Médio	16-18 cm	Material	NeoTex
Modelos Esquerdo e direito			



Tala Manex Radial

Feita de NeoTex, esta tala foi desenvolvida especificamente para pacientes com parestia radial, mas pode ser usada também para outros diagnósticos. Pode ser ajustada e adaptada ao longo de todo período de reabilitação do paciente, dado que tem 3 componentes: a parte dos dedos, uma peça para o polegar e a ortótese com plástico termomoldável no lado dorsal. Durante a utilização noturna, a parte dos dedos pode ser substituída por uma tira macia como faixa de apoio. **INDICAÇÕES** Possibilitar e auxiliar a função de preensão da mão. Síndrome do túnel cárpico, trauma após fratura do rádio, desvio cubital dos dedos ou subluxação das articulações MCP.

MR 2085 Tala Manex Radial

Tamanho	Circunferência do punho	Material	NeoTex
Pequeno	14-16 cm	Modelos Esquerdo e direito	
Médio	16-18 cm		
Grande	18-22 cm		

Tala Imobilização Punho/Polegar

Feita de SoftTex, esta ortótese foi especificamente configurada para os pacientes reumáticos. O modelo é mais plano. Tem uma faixa na zona do punho para um bom apoio da flexão volar. O fecho é com velcro, na zona dorsal, e houve o cuidado de reduzir o risco de pressão sobre a extremidade do cúbito. Inclui uma tala dinâmica de plástico. Sem latex. **INDICAÇÕES** Artrite reumatoide, instabilidade ou dor no punho, osteoartrose, osteoporose ou situações pós-traumáticas.

EU2020 Tala Imobilização Punho/Polegar

Tamanho	Circunferência do punho	Tamanho	Circunferência do punho
XX-Pequeno	12-13 cm	Grande	18-20 cm
X-Pequeno	13-14 cm	X-Grande	20-22 cm
Pequeno	14-16 cm	XX-Grande	21-23 cm
Médio	16-18 cm	Material	SoftTex
Modelos Esquerdo e direito			



Tala Pediátrica Manex Rheuma para Punho

Fabricada em SoftTex permeável e sem látex, esta tala para punho está anatomicamente dimensionada para apoiar a mão e punho duma criança. Permite o pleno movimento da articulação carpo-metacarpiana de todos os dedos, incluindo o polegar. É excelente para facilitar o funcionamento da mão nas atividades diárias, por exemplo brincar. A capacidade de preensão é melhorada, contribuindo para o desenvolvimento sensorial e motriz. Inclui uma peça ajustável do polegar e uma tala palmar de alumínio. As fitas do fecho são em velcro de várias cores para auxiliar a correta aplicação. **INDICAÇÕES** Prevenção e ajuste de deformações, compensação da perda de funções, descarga de tendões, redução da dor e descarga das articulações em crianças com Artrite Reumatoide.

MR2920 Tala Pediátrica Manex Rheuma para Punho

Tamanho	Circunferência do punho	Tamanho	Circunferência do punho
X-Pequeno	10-11 cm	Grande	14-15 cm
Pequeno	11-13 cm	X-Grande	15-17 cm
Médio	13-14 cm	Modelos Esquerdo e direito	



Tala Manex Rheuma Pollus

Feita de SoftTex, esta ortótese do punho inclui uma peça para o polegar a fim de conferir mais estabilidade à articulação CMC. A mola flexível de aço e a peça têxtil na zona do polegar podem ser ajustadas individualmente. Inclui ainda uma tala dinâmica de plástico. Sem latex. **INDICAÇÕES** Artrite reumatoide, instabilidade ou dor no punho, osteoartrose, osteoporose ou situações pós-traumáticas.

EU2022 Tala Manex Rheuma Pollus

Tamanho	Circunferência do punho	Tamanho	Circunferência do punho
XX-Pequeno	12-13 cm	Grande	18-20 cm
X-Pequeno	13-14 cm	X-Grande	20-22 cm
Pequeno	14-16 cm	XX-Grande	21-23 cm
Médio	16-18 cm	Material	SoftTex
Modelos Esquerdo e direito			





Luva para Edema com Abertura Distal

Esta é uma luva compressiva para o tratamento de edema. Fabricada num material elástico e poroso, de boa ventilação, pode ser usada de dia e de noite. Pode ser modificada facilmente. **INDICAÇÕES** Pós-operatório na sequência de fratura, quando há risco de edema, após trauma por AVC ou queimadura. Vendida à unidade, esquerda ou direita. Circunferência em mm. Medir à volta da palma no sítio das articulações metacarpianas. Um tamanho inferior dá maior compressão. Em caso de dúvida, escolha o tamanho maior. Limpeza: Lavar à mão.

902 Luva para Edema com Abertura Distal

Tamanhos	Circunferência (mm)	
X-Pequeno	178	Modelos Esquerdo e direito
Pequeno	203	
Médio	228	
Grande	255	



Luva para Edema (Fechada)

Esta é uma luva compressiva para o tratamento de edema. Fabricada num material elástico e poroso, de boa ventilação, pode ser usada de dia e de noite. Pode ser modificada facilmente. **INDICAÇÕES** Pós-operatório na sequência de fratura, quando há risco de edema, após trauma por AVC ou queimadura. Vendida à unidade, esquerda ou direita. Circunferência em mm. Medir à volta da palma no sítio das articulações metacarpianas. Um tamanho inferior dá maior compressão. Em caso de dúvida, escolha o tamanho maior. Limpeza: Lavar à mão.

903 Luva para Edema (Fechada)

Tamanhos	Circunferência (mm)	
X-Pequeno	178	Modelos Esquerdo e direito
Pequeno	203	
Médio	228	
Grande	255	



Tala Air-Soft para Repouso da Mão

Esta ortótese possibilita um apoio excelente para os dedos e punho seja na posição funcional, seja em repouso. O núcleo é de alumínio maleável com um revestimento de Velfoam. A tala pode ser ajustada individualmente, acompanhando os progressos do paciente. **INDICAÇÕES** Posicionamento correto da mão com edema, artrite reumática, pós-operatório, pós-AVC. Pode ser lavada na máquina, com água fria, no saco de lavagem incluído.

325 Tala Air-Soft para Repouso da Mão

Tamanho	Largura	
B-Pequeno	57-70 mm	
C-Médio	73-83 mm	
D-Grande	86-95 mm	

403



Tala Pucci para a Mão, Modelo Curto

Esta ortótese destina-se ao alongamento leve e passivo da mão contraída, podendo também ser usada por pacientes com problemas de higiene volar. A bolsa insuflável no interior do revestimento pode ser ajustada individualmente conforme o paciente. Aplique a ortótese na mão contraída com a válvula na parte lateral. Depois de estar fixa, deve ser insuflada. Antes de retirar a ortótese, deve esvaziar a bolsa de ar. Inclui bomba de ar e saco de lavagem. Pode adquirir revestimentos de substituição. Modelos esquerdo e direito. Limpeza: Revestimento - lavar na máquina até 40° C, no saco de lavagem incluído. Bolsa de ar: álcool etílico a 80%. INDICAÇÕES Após AVC com tónus moderado a elevado, para proteger da pressão na zona palmar.

403 Tala Pucci para a Mão, Modelo Curto

403L-Adulto	Esquerdo	Largura da mão até 120 mm	Universal
403R-Adulto	Direito	Largura da mão até 120 mm	Universal
403PL-Pediátrico	Esquerdo	Largura da mão até 120 mm	Universal
403PR-Pediátrico	Direito	Largura da mão até 120 mm	Universal
403PSL-Pediátrico	Esquerdo	Largura da mão até 64 mm	Universal
403PSR-Pediátrico	Direito	Largura da mão até 64 mm	Universal



405



Tala Pucci em 'T'

Esta ortótese combina uma estrutura ajustável para o punho com uma bolsa insuflável para a palma da mão. Proporciona um alongamento eficaz dos dedos e punho, no tratamento e prevenção de contraturas. A câmara de ar é insuflada depois

da aplicação. A pressão ligeira sobre os flexores provoca o seu relaxamento. A bolsa de ar induz também uma ligeira abdução volar no polegar, devendo ser esvaziada antes de se retirar a ortótese. Inclui bomba de ar e saco de lavagem. Pode adquirir revestimentos de substituição. Modelos esquerdo e direito. A medida é tirada a partir da depressão palmar. A largura da mão é medida na zona das articulações metacarpianas. O revestimento pode ser lavado na máquina depois retirar a estrutura e a bolsa de ar. Limpeza: Revestimento - lavar na máquina até 40° C, no saco de lavagem incluído. Bolsa de ar: álcool etílico a 80%
ADULTO: A estrutura tem 180 mm de comprimento. Para encomendar revestimentos adicionais, use as referências 405-CL ou 405-CR. **PEDIÁTRICO:** A estrutura tem 140 mm de comprimento. Para encomendar revestimentos adicionais, use as referências 405P-CL ou 405P-CR. **INDICAÇÕES** Após AVC com espasticidade moderada a elevada, para inibir o tónus e alongar os dedos, diagnóstico de paralisia cerebral.

405 Tala Pucci em 'T'

405L-Adulto	Esquerdo	Largura da mão até 130 mm	Universal
405R-Adulto	Direito	Largura da mão até 130 mm	Universal
405PL-Pediátrico	Esquerdo	Largura da mão até 130 mm	Universal
405PR-Pediátrico	Direito	Largura da mão até 130 mm	Universal



Tala Pucci para Separação dos Dedos

Esta faixa para separação dos dedos pode ser usada em conjunto com outras ortóteses Pucci ou separadamente. As argolas para os dedos separam-nos eficazmente, enquanto a faixa de espuma macia providencia uma ligeira extensão e apoio às falanges proximais. Disponível nos tamanhos Adulto e Pediátrico, em modelo universal. Limpeza: Lavar na máquina até 40° C, num saco de lavagem. INDICAÇÕES Após AVC quando é necessário separar os dedos.

812 Tala Pucci para Separação dos Dedos

812-Adulto	Esquerdo/Direito	Universal	Tamanho universal
812P-Pediátrico	Esquerdo/Direito	Universal	Tamanho universal




Tala Static-Pro para Punho

Esta ortótese do punho foi concebida para um alongamento eficaz do punho, podendo ser utilizada para extensão e flexão no mesmo dispositivo. O ângulo pode ser ajustado no botão regulador na zona da articulação. As mangas maleáveis em arame e espuma podem ser recortadas e ajustadas para uma adaptação personalizada. Os forros podem ser lavados e comprados à parte. Tamanho universal. Modelos esquerdo e direito Limpeza: Forros e faixas - lavar na máquina até 40° C, num saco de lavagem. Estrutura: álcool etílico a 80%. INDICAÇÕES Após injeções de toxina da botulina para alongamento do punho e extensão eficaz dos tendões do flexor.

4415 Tala Static-Pro para Punho

4415R	Direito	Tamanho universal
4415L	Esquerdo	Tamanho universal
Forro de substituição:		
4415PK	Universal	

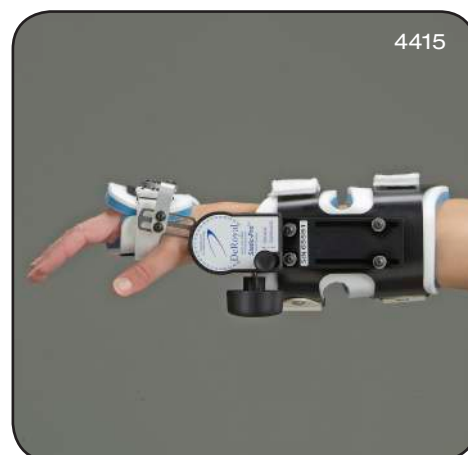

Tala Static-Pro para Cotovelo

Esta ortótese do cotovelo foi concebida para o alongamento eficaz e relaxamento da tensão dos tecidos com contraturas. A mesma ortótese pode ser utilizada para extensão e flexão. O ângulo pode ser ajustado no botão regulador na zona da articulação. As mangas maleáveis em arame e espuma podem ser ajustadas individualmente. Os forros podem ser lavados e comprados à parte. Tamanho universal. Modelos esquerdo e direito. Limpeza: Forros e faixas - lavar na máquina até 40° C, num saco de lavagem. Estrutura: álcool etílico a 80%. INDICAÇÕES Após injeções de toxina da botulina para alongamento do punho e extensão eficaz dos tendões do flexor.

4425 Tala Static-Pro para Cotovelo

4425R	Direito	Tamanho universal
4425L	Esquerdo	Tamanho universal
Forro de substituição:		
4425PKR	Direito	
4425PKL	Esquerdo	





- 00 HOME
- 01 EMPRESA
- 02 CATÁLOGO
- 03 NOTÍCIAS
- 04 LINKS
- 05 CONTACTO

PEQUISA

MAILING LIST

SUBMITER



Benvindos ao site da JMV Produtos Hospitalares!

Este site tem como objectivo dar a conhecer os produtos que comercializamos. A JMV Produtos Hospitalares Lda. fornece, desde 1987, hospitais públicos e privados, clínicas, centros de saúde, lares privados e estatais, farmácias e ortopedias, trabalhando com a maioria dos profissionais de saúde.

Para mais informações contacte-nos directamente.

Agradecemos a sua visita.

outras notícias

Férias ...
Aproximando-se o período de férias, a JMV

JMV conquista estatuto de PME Líder ...
É com muito orgulho que Informamos os

jmv.com.pt
mediroyal.se

JMV Produtos Hospitalares
Centro Empresarial Sintra - Estoril VI, Edifício T1
Estrada de Albarraque Linhó, 2710-297 Sintra
Tel +351 21 924 82 90 Fax +351 21 924 49 99

www.jmv.com.pt
info@jmv.com.pt

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se