




Tecnologias de Saúde

[www.jmv.com.pt](http://www.jmv.com.pt)



# Talas para Dedos

## Oval 8 / Tala para Dedos

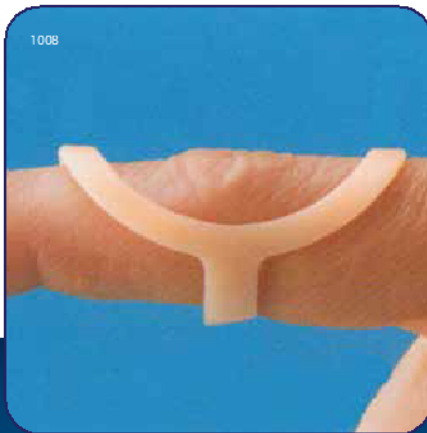


**Descrição técnica:** A Tala Oval 8 estabiliza, alivia e corrige as articulações interfalângicas. Contribui para melhorar o funcionamento da mão sem ser muito volumosa. Fabricada em polipropileno com 1,6mm de espessura, é confortável e fácil de limpar. Pode ser ajustada individualmente com um secador de mão. Os tamanhos disponíveis são idênticos aos das alianças de casamento: 2 -15. Vendem-se individualmente ou numa caixa de conjunto com 44 peças.

**Fim a que se destina:** Dedo em colo de cisne, botoeira, dedo em martelo, redução de desvio lateral ou descarga do dedo em gatilho.

Refª	Tamanho	Quantidade
1008	2 - 15	1
1008-S	2 - 15	44



## Tala Extensão Dedo

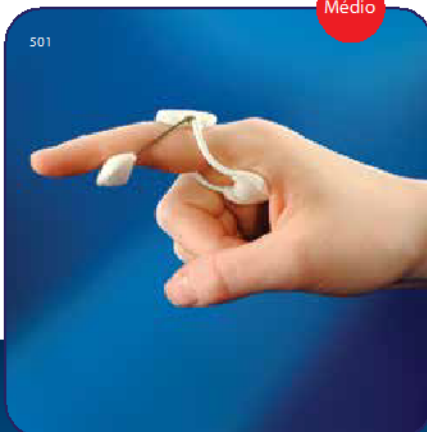

Médio

**Descrição técnica:** Esta tala faz a extensão da articulação interfalângica proximal (IFP) e tem um ligeiro efeito de extensão também ao nível da articulação metacarpo-falângica (MCF). A articulação interfalângica distal (IFD) fica totalmente liberta. A pressão é distribuída pela almofada dorsal, podendo ser aumentada ou reduzida por meio do ajuste da mola. A força é de 2,3 N em 15º de flexão.

**Fim a que se destina:** Deficiências de 45º ou menos na extensão da articulação IFP, deformação de Boutonnière.

Refª	Comprimento x Largura
501AA R	57 x 22 mm
501A R	67 x 22 mm
501B R	76 x 25 mm
501C R	89 x 29 mm
501D R	102 x 29 mm



## Tala com Mola Helicoidal para Extensão do Dedo



Extra Forte

**Descrição técnica:** Esta tala permite um grau superior de extensão da articulação interfalângica proximal do dedo (IFP). As molas helicoidais estão colocadas nas duas laterais da articulação enquanto as almofadas, uma distal e outra proximal, contribuem para a distribuição homogênea da pressão. A faixa anterior é ajustável com velcro. A força aplicada sobre a articulação é de aproximadamente 12,4 N em plena extensão.

**Fim a que se destina:** Contraturas de flexão da articulação IFP.

Refª	Comprimento
502A R	64 mm
502B R	70 mm
502C R	76 mm
502D R	83 mm



Médio

503



## Tala com Mola Helicoidal para Flexão do Dedo

**Descrição técnica:** Esta tala de mola permite auxiliar a flexão da articulação IFP. A almofada dorsal proporciona uma excelente aplicação, com distribuição uniforme da pressão. A tensão que a tala exerce consegue fletir uma articulação descontraída até 80°, com uma força de cerca de 2,3 N.

**Fim a que se destina:** Contracturas de extensão da articulação IFP

Refª Comprimento

503A R	64 mm
503B R	70 mm
503C R	76 mm
503D R	83 mm

Médio

504



## Tala para Extensão da Articulação IFP

**Descrição técnica:** A tala 504 é uma versão mais curta da tala 501, evitando o envolvimento da articulação MCF. Os tamanhos mais pequenos podem ser usados na articulação IFD. A mola é facilmente ajustável, tendo uma força de 2,3 N em 15° de flexão.

**Fim a que se destina:** Deficiências de 45° ou menos na extensão da articulação IFP, deformação de Boutonnière.

Refª Comprimento x Largura

504AA R	44x22mm
504A R	48x22mm
504B R	51x25mm
504C R	57x29mm
504D R	67x29mm

Forte

507



## Tala ACU para Extensão do Dedo

**Descrição técnica:** Esta tala tem bastante força de extensão e é ideal para recuperar os últimos graus de extensão da IFP. A mola pode ser ajustada apertando com cuidado as almofadas nas extremidades. A almofada dorsal assegura uma distribuição uniforme da pressão pelo dedo. A força aplicada sobre a articulação é cerca de 3,4 N em 15° de flexão.

**Fim a que se destina:** Contraturas de flexão com limitações no âmbito do movimento e rigidez crescente das articulações.

Refª Comprimento x Largura

507AA R	57x22mm
507A R	67x22mm
507B R	76x25mm
507C R	86x29mm
507D R	95x29mm

Leve

601



## Tala para Flexão do Dedo

**Descrição técnica:** Esta tala permite a flexão eficaz da articulação IFP ou IFD, sendo ideal para tratamentos prolongados devido à sua baixa força, cerca de 1,1 N.

**Fim a que se destina:** Recuperação da flexão da articulação IFP após contratura. Redução da deformidade do dedo em gatilho e dos efeitos de lesões por esmagamento ou queimadura.

Refª	Comprimento
601AA R	32 mm
601A R	38 mm
601B R	44 mm
601C R	57 mm
601D R	70 mm

Leve

602



## Tala para Extensão Ligeira do Dedo

**Descrição técnica:** A tala 602 permite uma extensão ligeira mas eficaz das articulações interfalângicas, podendo ser usada em contraturas de flexão quer da IFP quer da IFD. É ideal para tratamentos prolongados devido à sua baixa força, cerca de 1,1 N em 15° de flexão.

**Fim a que se destina:** Lesões por esmagamento ou queimadura, deformação de Boutonnière ou contraturas da articulação IFP.

Refª	Comprimento x Largura
602AA R	44x22mm
602A R	48x22mm
602B R	51x25mm
602C R	57x29mm
602D R	67x29mm

## Talas "Open Air"

620



**Descrição técnica:** A tala Stax é feita de policarbonato transparente, destina-se à proteção da falange distal e extensão da articulação IFD. O material perfurado da tala reduz a possibilidade de maceração da pele e a abertura em janela permite a observação da ponta do dedo e do leito da unha.

**Fim a que se destina:** Lesões do dedo e da unha, dedo em martelo.

Refª	Quantidade	Tamanho	Refª	Quantidade	Tamanho
620	2 talas	0	626	3 talas	6
621	3 talas	1	627	2 talas	7
622	5 talas	2	6235	5 talas	3,5
623	5 talas	3	6255	5 talas	5,5
624	5 talas	4	640	25 tiras de velcro	n/a
625	5 talas	5	635	Kit Talas	n/a

+ 50 tiras de velcro

## Kit Talas "Open Air"

635



**Descrição técnica:** A tala Stax é feita de policarbonato transparente, destina-se à proteção da falange distal e extensão da articulação IFD. O material perfurado da tala reduz a possibilidade de maceração da pele e a abertura em janela permite a observação da ponta do dedo e do leito da unha.

**Fim a que se destina:** Lesões do dedo e da unha, dedo em martelo.

Refª	Descrição	Tamanho	Refª	Descrição	Tamanho
620	2 talas	0	625	5 talas	5
621	3 talas	1	626	3 talas	6
622	5 talas	2	627	2 talas	7
623	5 talas	3	6235	5 talas	3,5
624	5 talas	4	6255	5 talas	5,5

1 50 tiras de velcro

## Finger Hugger – Estabilizador de Dedo RIC\*

670



**Descrição técnica:** É simultaneamente uma tala estática e dinâmica com compressão, num conceito único que permite a utilização para estabilização estática em conjunto com a compressão e mobilidade necessárias. A bolsa de reforço no lado volar permite a aplicação de uma tala rígida de alumínio ou uma mola flexível de aço. A compressão pode ser ajustada caso a caso por meio do fecho com atacadores.

\*RIC – Recuperação, Imobilização, Compressão

**Fim a que se destina:** Fraturas dos dedos da mão, lesões dos ligamentos, dedo em gatilho, dedo botoeira.

Refª	Comprimento
670AA R	32 mm
670A R	51 mm
670B R	64 mm
670C R	76 mm
670D R	89 mm



## Tala Tipo Zimmer

9115



**Descrição técnica:** Tala para imobilização dos dedos tipo "Zimmer", fabricada em alumínio e espuma. As talas de Zimmer podem ser cortadas ao tamanho desejado para proporcionar uma imobilização mais confortável.

**Fim a que se destina:** Fraturas das Falanges.

Refª	Largura x Comprimento
9115-02 R	1,25x45 cm
9115-03 R	2x45 cm
9115-04 R	2,5x45 cm

## Tala para Desvio Cubital

202



**Descrição técnica:** Esta tala é formada por um núcleo de alumínio forrado de plastizote, o que a torna muito leve, ajustável, macia e confortável para o paciente. Serve para apoio e correção das articulações MCF, bem como para endireitar os dedos. Pode ser usada para apoio do arco palmar em doentes reumáticos e limite temporário do âmbito de movimento. A largura da mão deve ser medida (em mm) por cima da articulação MCF. Há uma versão esquerda e outra direita.

**Fim a que se destina:** Artrite reumatoide, desvio cubital, pós-operatório na cirurgia metacarpo-falângica.

Refª	Tamanho	Largura	Mão
202BL R	S	57-70 mm	Esq.
202BR R	S	57-70 mm	Dir.
202CL R	M	73-83 mm	Esq.
202CR R	M	73-83 mm	Dir.
202DL R	L	86-95 mm	Esq.
202DR R	L	86-95 mm	Dir.



## Faixa para Extensão/Flexão do Dedo

1006



**Descrição técnica:** Esta faixa pode ser utilizada como tala de extensão ou flexão de forma muito confortável, quer de dia quer durante a noite. Prenda a faixa no dedo e depois passe um fio de borracha ou de nylon através do anel e prenda na tala. Trata-se dum material sem látex, com uma boa fricção e permeável ao ar, de óptimo contacto com a pele.

**Fim a que se destina:** Pós-operatório em defeitos de extensão.

Refª	Tamanho	Cor	Embalagem
1006	Universal	Preta	5 e 25 unidades

## Faixa de Junção 13 mm

1005



**Descrição técnica:** Esta faixa de ligação confortável e segura é feita num material de espuma sem látex, de baixo perfil e boa aderência. É ideal para actividades desportivas e quotidianas.

**Fim a que se destina:** Distorções ligeiras, inchaço, dor ou lesões dos ligamentos. Também pode ser usada em fraturas estáveis.

Refª	Tamanho	Largura	Cor	Embalagem
1005	Universal	13 mm	Preta	5/25/50/100



# Talas para Punho e Cotovelo



## Cotoveleira de Neoprene para Ténis

MR8821



**Descrição técnica:** A tala para Epicondilite é feita com espuma moldável e revestida com Neotex, para proporcionar maior conforto. A forma em D e a ligadura elástica permitem a fácil aplicação e uma descarga do tendão mais eficaz.

**Fim a que se destina:** Dor e inflamação do cotovelo de tenistas.

Refª	Tamanho	Circunferência
MR8821	Universal	20 - 32 cm



## Tala Thenax FormAT Mid

EU2051



**Descrição técnica:** Este modelo inovador consiste numa tala mista de material têxtil (neoTex) e termoplástico. A peça de termoplástico é moldada com água quente diretamente no paciente ou já colocada na bolsa interior. Possui também uma peça ajustável para o polegar. Este sistema é muito confortável e permite um apoio personalizado.

**Fim a que se destina:** Instabilidade ligeira a moderada e/ou dor das articulações CMC ou MCF, lesões de ligamentos, Morbus de Quervain, tendinites, doenças degenerativas ou pós-traumáticas.

Refª	Tamanho	Mão	Circunferência do punho	Refª	Tamanho	Mão	Circunferência do punho
EU2051-XSL R	XS	Esq.	13-14 cm	EU2051-MRR	M	Dir.	16-18 cm
EU2051-XSR R	XS	Dir.	13-14 cm	EU2051-LL R	L	Esq.	18-20 cm
EU2051-SL R	S	Esq.	14-16 cm	EU2051-LR R	L	Dir.	18-20 cm
EU2051-SR R	S	Dir.	14-16 cm	EU2051-XLL R	XL	Esq.	20-22 cm
EU2051-MLR	M	Esq.	16-18 cm	EU2051-XLR R	XL	Dir.	20-22 cm



## Tala Estabilizadora Thenax Duo

MR2184



**Descrição técnica:** Fabricada em Tritex (sem látex), esta tala foi desenvolvida para estabilizar as articulações carpometacarpiana e metacarpiana, bem como a eminência tenar. A faixa dorsal, com a peça fina de plástico integrada, proporciona um apoio eficaz para a eminência tenar em abdução palmar. O fecho é de velcro macho/fêmea com fitas de Lycra, de fácil aplicação.

**Fim a que se destina:** Dor, fraqueza, artrose, osteoartrite, problemas reumáticos e tendinites. Limpeza: Lavar à mão.

Refª	Tamanho	Mão	Circunferência do Punho
MR2184-S	S	Esq.	14 - 16 cm
MR2184-S	S	Dir.	14 - 16 cm
MR2184-M	M	Esq.	16 - 18 cm
MR2184-M	M	Dir.	16 - 18 cm
MR2184-L	L	Esq.	18 - 20 cm
MR2184-L	L	Dir.	18 - 20 cm



## Tala Manex Radial



MR2085



**Descrição técnica:** Feita de NeoTex, esta tala foi desenvolvida especificamente para pacientes com paresia radial, mas pode ser usada também para outros diagnósticos. Pode ser ajustada e adaptada ao longo de todo período de reabilitação do paciente, dado que tem 3 componentes: a parte dos dedos, uma peça para o polegar e a ortótese com plástico termomoldável no lado dorsal. Durante a utilização noturna, a parte dos dedos pode ser substituída por uma tira macia como faixa de apoio.

**Fim a que se destina:** Possibilitar e auxiliar a função de preensão da mão. Síndrome do túnel cárpico, trauma após fratura do rádio, desvio cubital dos dedos ou subluxação das articulações MCP.

Refª	Tamanho	Circunferência do punho	Mão
MR2085-SL R	S	13-16 cm	Esq.
MR2085-SR R	S	13-16 cm	Dir.
MR2085-ML R	M	16-18 cm	Esq.
MR2085-MR R	M	16-18 cm	Dir.
MR2085-LL R	L	18-22 cm	Esq.
MR2085-LR R	L	18-22cm	Dir.

## Tala Pediátrica Manex Rheuma para Punho



MR2920



**Descrição técnica:** Fabricada em SoftTex permeável e sem látex, esta tala para punho está anatomicamente dimensionada para apoiar a mão e punho duma criança. Permite o pleno movimento da articulação carpo-metacarpiana de todos os dedos, incluindo o polegar. É excelente para facilitar o funcionamento da mão nas actividades diárias, por exemplo brincar. A capacidade de preensão é melhorada, contribuindo para o desenvolvimento sensorial e motriz. Inclui uma peça ajustável do polegar e uma tala palmar de alumínio.

As fitas do fecho são em velcro de várias cores para auxiliar a correcta aplicação.

**Fim a que se destina:** Prevenção e ajuste de deformações, compensação da perda de funções, descarga de tendões, redução da dor e descarga das articulações em crianças com Artrite Reumatoide.

Refª	Tamanho	Mão	Circunferência do punho	Refª	Tamanho	Mão	Circunferência do punho
MR2920-XSL R	XS	Esq.	10-11 cm	MR2920-LR R	L	Dir.	14-15 cm
MR2920-XSR R	XS	Dir.	10-11 cm	MR2920-LL R	L	Esq.	14-15 cm
MR2920-SL R	S	Esq.	11-13 cm				
MR2920-SR R	S	Dir.	11-13 cm				
MR2920-ML R	M	Esq.	13-14 cm				
MR2920-MR R	M	Dir.	13-14cm				

## Tala Imobilização Punho/Polegar



EU2020



**Descrição técnica:** Feita de SoftTex, esta ortótese foi especificamente configurada para os pacientes reumáticos. O modelo é mais plano. Tem uma faixa na zona do punho para um bom apoio da flexão volar. O fecho é com velcro, na zona dorsal, e houve o cuidado de reduzir o risco de pressão sobre a extremidade do cúbito. Inclui uma tala dinâmica de plástico. Sem latex.

**Fim a que se destina:** Artrite reumatoide, instabilidade ou dor no punho, osteoartrose, osteoporose ou situações pós-traumáticas.

Refª	Tamanho	Mão	Circunferência do punho	Refª	Tamanho	Mão	Circunferência do punho
EU2020-XSL	XS	Esq.	13-14 cm	EU2020-LL	L	Esq.	18-20 cm
EU2020-XSR	XS	Dir.	13-14 cm	EU2020-LR	L	Dir.	18-20 cm
EU2020-SR	S	Dir.	14-16 cm	EU2020-XLL	XL	Esq.	20-22 cm
EU2020-SL	S	Esq.	14-16 cm	EU2020-XLR	XL	Dir.	20-22 cm
EU2020-ML	M	Esq.	16-18 cm				
EU2020-MR	M	Dir.	16-18 cm				

## Tala Manex Rheuma Pollus




**Descrição técnica:** Feita de SoftTex, esta ortótese do punho inclui uma peça para o polegar a fim de conferir mais estabilidade à articulação CMC. A mola flexível de aço e a peça têxtil na zona do polegar podem ser ajustadas individualmente. Inclui ainda uma tala dinâmica de plástico. Sem latex.

**Fim a que se destina:** Artrite reumatoide, instabilidade ou dor no punho, osteoartrose, osteoporose ou situações pós-traumáticas.

Refª	Tamanho	Punho	Circunferência do punho	Refª	Tamanho	Punho	Circunferência do punho
EU2022-XSL	XS	Esq.	13-14 cm	EU2022-MR	M	Dir.	16-18 cm
EU2022-XSR	XS	Dir.	13-14 cm	EU2022-LL	L	Esq.	18-20 cm
EU2022-SL	S	Esq.	14-16 cm	EU2022-LR	L	Dir.	18-20 cm
EU2022-SR	S	Dir.	14-16 cm	EU2022-XLL	XL	Esq.	20-22 cm
EU2022-ML	M	Esq.	16-18 cm	EU2022-XLR	XL	Dir.	20-22 cm



## Tala Air-Soft para Repouso da Mão

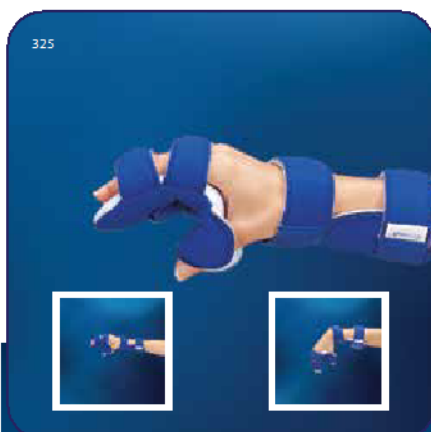

**Descrição técnica:** Esta ortótese possibilita um apoio excelente para os dedos e punho seja na posição funcional, seja em repouso. O núcleo é de alumínio maleável com um revestimento de Velfoam. A tala pode ser ajustada individualmente, acompanhando os progressos do paciente.

**Fim a que se destina:** Posicionamento correto da mão com edema, artrite reumática, pós-operatório, pós-AVC. Pode ser lavada na máquina, com água fria, no saco de lavagem incluído.

Refª	Tamanho	Largura	Mão
325BL	B-Pequeno	57-70 mm	Esq.
325BR	B-Pequeno	57-70 mm	Dir.
325CL	C-Médio	73-83 mm	Esq.
325CR	C-Médio	73-83 mm	Dir.
325DL	D-Grande	86-95 mm	Esq.
325DR	D-Grande	86-95 mm	Dir.



## Tala Pucci para Mão, Modelo Curto



**Descrição técnica:** Esta Ortótese, destina-se ao alongamento leve e passivo da mão contraída, podendo também ser usada por pacientes com problemas de higiene volar. A bolsa insuflável no interior do revestimento pode ser ajustada individualmente conforme o paciente. Aplique a ortótese na mão contraída com a válvula na parte lateral. Depois de estar fixa, deve ser insuflada. Antes de retirar a ortótese, deve esvaziar a bolsa de ar. Inclui bomba de ar e saco de lavagem. Pode adquirir revestimentos de substituição. Modelos esquerdo e direito. Limpeza: revestimento - lavar na máquina até 40°C, no saco de lavagem incluído. Bolsa de ar: álcool etílico a 80%.

**Fim a que se destina:** Após AVC com tónus moderado elevado, para proteger da pressão na zona palmar.

Refª	Tamanho	Mão	Tipo	Largura da mão
403 L	Universal	Esq.	Adulto	Até 120 mm
403 R	Universal	Dir.	Adulto	Até 120 mm
403 PL	Universal	Esq.	Pediátrico	Até 120 mm
403 PR	Universal	Dir.	Pediátrico	Até 120 mm
403 PSL	Universal	Esq.	Pediátrico	Até 64 mm
403 PSR	Universal	Dir.	Pediátrico	Até 64 mm



812



## Tala Pucci para Separação dos Dedos

**Descrição técnica:** Esta faixa para separação dos dedos pode ser usada em conjunto com outras ortóteses Pucci ou separadamente. As argolas para os dedos separam-nos eficazmente, enquanto a faixa de espuma macia providencia uma ligeira extensão e apoio às falanges proximais. Disponível nos tamanhos Adulto e Pediátrico, em modelo universal. Limpeza: Lavar na máquina até 40°C, num saco de lavagem.

**Fim a que se destina:** Após AVC quando é necessário separar os dedos

Refª	Tamanho	Tipo	Mão
812	Universal	Adulto	Esq.
812	Universal	Adulto	Dir.
812P	Universal	Pediátrico	Esq.
812P	Universal	Pediátrico	Dir.

405



## Tala Pucci em "T"

**Descrição técnica:** Esta ortótese combina uma estrutura ajustável para o punho com uma bolsa insuflável para a palma da mão. Proporciona um alongamento eficaz dos dedos e punho, no tratamento e prevenção das contraturas. A câmara de ar é insuflada depois da aplicação. A pressão ligeira sobre os flexores provoca o seu relaxamento. A bolsa de ar induz também uma ligeira abdução volar no polegar, devendo ser esvaziada antes de se retirar a ortótese. Inclui bomba de ar e saco de lavagem. Pode adquirir revestimentos de substituição. Modelos esquerdo e direito. A medida é tirada a partir da depressão palmar. A largura da mão é medida na zona das articulações metacarpianas. O revestimento pode ser lavado na máquina depois retirar a estrutura e a bolsa de ar. Limpeza: Revestimento - lavar na máquina até 40°C, no saco de lavagem incluído. Bolsa de ar: álcool etílico a 80%. Adulto: A estrutura tem 180 mm de comprimento. Para encomendar revestimentos adicionais, use as referências 405-CL ou 405-CR. Pediátrico: A estrutura tem 140 mm de comprimento. Para encomendar revestimentos adicionais, use as referências 405P-CL ou 405P-CR.

**Fim a que se destina:** Após AVC com espasticidade moderada a elevada, para inibir o tónus e alongar os dedos, diagnóstico de paralisia cerebral.

Refª	Tipo	Mão	Tamanho	Largura da mão
405L	Adulto	Esq.	Universal	até 130 mm
405R	Adulto	Dir.	Universal	até 130 mm
405PL	Pediátrico	Esq.	Universal	até 130 mm
405PR	Pediátrico	Dir.	Universal	até 130 mm



## Tala Static-Pro para Punho

**Descrição técnica:** Esta ortótese do punho foi concebida para um alongamento eficaz do punho, podendo ser utilizada para extensão e flexão no mesmo dispositivo. O ângulo pode ser ajustado no botão regulador na zona da articulação. As mangas maleáveis em arame e espuma podem ser recortadas e ajustadas para uma adaptação personalizada. Os forros podem ser lavados e comprados à parte. Tamanho universal. Modelos esquerdo e direito. Limpeza: álcool etílico a 80%.

**Fim a que se destina:** Após injeções de toxina da butulina para alongamento do punho e extensão eficaz dos tendões do flexor.

4415



Refª	Tamanho	Mão
4415R	Universal	Dir.
4415L	Universal	Esq.

**Forro Substituição**  
4415PK Universal

## Tala Static-Pro para Cotovelo



**Descrição técnica:** Esta ortótese do cotovelo foi concebida para o alongamento eficaz e relaxamento da tensão dos tecidos com contraturas. A mesma ortótese pode ser utilizada para extensão e flexão. O ângulo pode ser ajustado no botão regulador na zona da articulação. As mangas maleáveis em arame e espuma podem ser ajustadas individualmente. Os forros podem ser lavados e comprados à parte. tamanho universal. Modelos esquerdo e direito. Limpeza: forros e faixas - lavar na máquina até 40°C, num saco de lavagem. Estrutura: álcool etílico a 80%.

**Fim a que se destina:** Após injecções de toxina da butulina para alongamento do punho e extensão eficaz dos tendões do flexor.

Refª	Tamanho	Mão
4425R	Universal	Dir.
4425L	Universal	Esq.

### Forro Substituição

4425PKR	Dir.
4425PKL	Esq.

## Luva para Edema com Abertura Distal



**Descrição técnica:** Esta é uma luva compressiva para o tratamento de edema. Fabricada num material elástico e poroso, de boa ventilação, pode ser usada de dia e de noite. pode ser modificada facilmente.

**Fim a que se destina:** Pós-operatório na sequência de fratura, quando há risco de edema, após trauma por AVC ou queimadura. Vendida à unidade, esquerda ou direita. Circunferência em mm. Medir à volta da palma no sítio das articulações metacarpianas. Um tamanho inferior dá maior compressão.

Em caso de dúvida, escolha o tamanho maior. Limpeza: Lavar à mão.

Refª	Tamanho	Mão	Circunferência (mm)	Refª	Tamanho	Mão	Circunferência (mm)
902-XSL	XS	Esq.	178 mm	902-LL	L	Esq.	255 mm
902-XSR	XS	Dir.	178 mm	902-LR	L	Dir.	255 mm
902-SL	S	Esq.	203 mm				
902-SR	S	Dir.	203 mm				
902-ML	M	Esq.	228 mm				
902-MR	M	Dir.	228 mm				

## Luva para Edema (Fechada)



**Descrição técnica:** Esta é uma luva compressiva para o tratamento de edema. Fabricada num material elástico e poroso, de boa ventilação, pode ser usada de dia e de noite. Pode ser modificada facilmente.

**Fim a que se destina:** Pós-operatório na sequência de fratura, quando há risco de edema, após trauma por AVC ou queimadura. Vendida à unidade, esquerda ou direita. Circunferência em mm. Medir à volta da palma no sítio das articulações metacarpianas. Um tamanho inferior dá maior compressão.

Em caso de dúvida, escolha o tamanho maior. Limpeza: Lavar à mão.

Refª	Tamanho	Mão	Circunferência (mm)	Refª	Tamanho	Mão	Circunferência (mm)
903-XSL	XS	Esq.	178 mm	903-MR	M	Dir.	228 mm
903-XSR	XS	Dir.	178 mm	903-LL	L	Esq.	255 mm
903-SL	S	Esq.	203 mm	903-LR	L	Dir.	255 mm
903-SR	S	Dir.	203 mm				
903-ML	M	Esq.	228 mm				



**JMV**  
*produtos hospitalares*

